

ultrammat S

HIGH SPEED AMALGAMATOR

HOCHFREQUENZ MISCHGERÄT
AMALGAMADOR DE ALTA VELOCIDADE
AMALGAMADOR DE ALTA VELOCIDAD
VIBREUR ELECTRONIQUE A GRANDE VITESSE
VIBRATORE PER AMALGAMA AD ALTA VELOCITÀ
HIGH SPEED CAPSULESCHUDDER
HØJHASTIGHEDS-KAPSELRYSTER
HØYHASTIGHETS-KAPSELRYSTER
NOPEA KAPSELISEKOITIN
ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΔΟΝΗΤΗΣ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ
WYSOKOOBROTOWY MIESZALNIK
NAGY SEBESSÉGŰ KAPSZULARÁZÓGÉP
SUURE KIIRUSEGA AMALGAAMISEGISTI
HITRI MEŠALEC AMALGAMA
AUGSTAS FREKVENCES AMALGAMATORS
DIDELIŲ APSUKŲ AMALGAMŲ MAIŠYTUVAS
VYSOKO RÝCHLOSTNÝ AMALGAMÁTOR
HITRI MEŠALEC AMALGAMA
高速アマルガムミキサー
高速銀汞調拌机



S de simples!

ultrammat S



Amalgamador de alta velocidade


- Trituração exata e consistente
- Extremamente silencioso e com baixa vibração
- Simples de usar – apenas 3 botões
- Compatível com todas as cápsulas
- Fácil de limpar
- Identificador de baixa potência e função de desligar
- Bi-volt



ultramat S características:


Muito simples, um botão para cada fase

Existem três opções de tempo, 6, 8 e 10 segundos para misturar os materiais encapsulados. A trituração pode ser interrompida ao pressionar estes botões durante a operação ou apenas ao se levantar a tampa.

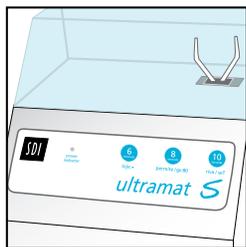

Fácil de limpar!

A superfície lisa do aparelho é higiênica, facilitando a limpeza e o controle de infecção. Esta superfície plástica não-porosa pode ser limpa com qualquer desinfetante dental.

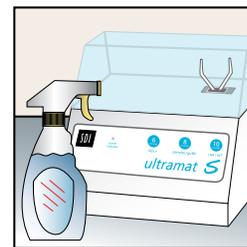


Trituração exata e consistente

O Ultramat S tem um microprocessador interno que controla o tempo de oscilação, garantindo uma trituração mais exata e consistente.




Bi-volt

O Ultramat S opera nas voltagens entre 100-120 e 220-240V, 50 e 60Hz – sendo compatível com várias voltagens e frequências.

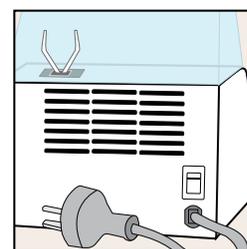


Baixa vibração e extremamente silencioso

Diferente de outros amalgamadores, o Ultramat S tem um ruído muito baixo. Apresenta uma vibração mínima assegurando que sua parte externa não se mova fazendo com que ele permaneça estável.

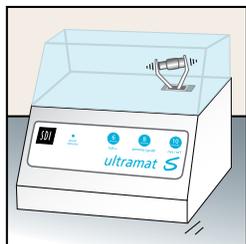


Indicador de baixa potência e função de desligar

Caso haja uma queda de energia elétrica (a potência exigida pelo aparelho é de 100-120V e 220-240V), a luz azul que indica a potência irá piscar e o aparelho não irá funcionar até que seja fornecida a energia necessária. Isso previne que ocorra uma falha na mistura do material.

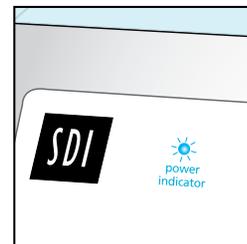


Compatível com todas as cápsulas

Apresenta garfo flexível que se encaixa em qualquer cápsula arredondada (cápsulas de amálgama), e também nas que contém êmbolos (como as cápsulas de cimento de ionômero de vidro).

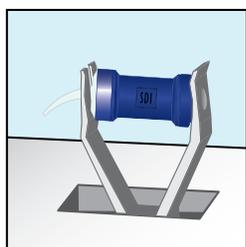



Trava de segurança

O Ultramat S interrompe imediatamente a trituração ao levantar a tampa transparente.

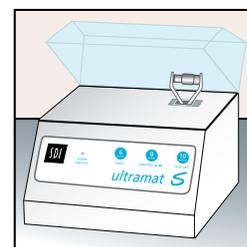

Saída de alta energia, entrada de pouca energia

A frequência do processo de trituração é de 4550 oscilações por minuto (+/- 1%), O Ultramat S garante a completa trituração de qualquer material, consumindo pouca energia.

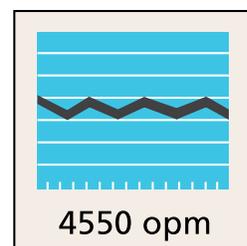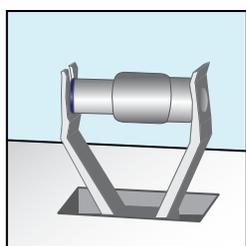

ultramats



Dimensões:

largura	profundidade	altura
217mm	173mm	180mm
8 1/2"	6 3/4"	7 1/8"

Voltagem:

100 - 120 volts
220 - 240 volts
50 - 60 Hz

Peso:

2.43kg
5.4lbs

Ultramat S

(em todos os países – inclui cabo de força para todas as regiões na qual o produto é distribuído)
Código de pedido 5546058



Fabricado na Austrália pela SDI Limited



(31) 3271-9839 | 3271-9839

www.emigeodonto.com.br

licitacao@emigeodonto.com.br
documentacao@emigeodonto.com.br

